

IBox Touch

Soluzione All-in-One
dal leader di mercato tedesco

Connessione fluida tra SIO, dispositivi medici e PACS

La nostra soluzione All-in-One, unica nel suo genere, semplifica notevolmente l'acquisizione, la visualizzazione e la condivisione di immagini e video medici in formato DICOM nella pratica clinica quotidiana. A differenza dei sistemi convenzionali, IBox Touch collega in modo fluido il SIO, i dispositivi di diagnostica per immagini e il PACS in un unico dispositivo compatto. Grazie all'interfaccia intuitiva ed ergonomica, il personale sanitario risparmia tempo prezioso da dedicare all'assistenza dei pazienti, mentre l'elevata affidabilità riduce al minimo la necessità di manutenzione.



I vostri vantaggi in sintesi

- Collega SIO, dispositivi di imaging e PACS**

IBox Touch recupera i dati dei pazienti da SIO / RIS e invia immagini e video al PACS tramite DICOM. I dati vengono salvati in modo sicuro anche offline e inviati automaticamente quando la connessione viene ripristinata.
- Selezione rapida e mirata dei pazienti**

Recupero automatico della worklist, filtrabile in modo intelligente per sala, tipo di esame, operatore e altri criteri.
- Ampio campo di applicazione in medicina**

Semplifica la routine quotidiana in endoscopia, chirurgia, ortopedia e ginecologia – ideale per procedure come endoscopia rigida e flessibile, colposcopia e microscopia.
- Consulenze a distanza e Live Streaming**

Visualizzazione congiunta di casi complessi da remoto o presentazioni in aula.
- Assistenza rapida e affidabile**

Il nostro team di assistenza è disponibile per risolvere problemi o rispondere alle vostre domande.

Ecco cosa rende unico l'IBox Touch



Intuitiva da usare come uno smartphone



Montaggio ergonomico e salvaspazio



Un'unica soluzione per tutti i dispositivi di imaging



Configurabile secondo le vostre esigenze

“Con IBox Touch abbiamo trovato una soluzione per la documentazione di immagini e video che ci colpisce ogni giorno. Oltre alla gestione semplice e intuitiva, la sua affidabilità è davvero notevole.”

Prof. Dr. med. Uwe Will, Primario, SRH-Wald-Klinikum Gera

Funzioni principali



Recupero della Worklist DICOM dal SIO



Acquisizione di immagini e video di qualsiasi durata



Trasferimento automatico o selettivo



Amministrazione centrale direttamente dall'ufficio IT

Fissa un appuntamento.
Siamo lieti di consigliarti.



Persona di riferimento
Corinna Schwerin
corinna.schwerin@meso.biz

meso international GmbH
Markt 21-23, 09648 Mittweida
Germania

Telefono: +49 3727 9697 – 0
E-mail: info@meso.biz
www.IBoxTouch.com

Workflow IHE con IBox Touch

Collega endoscopi e altri dispositivi di imaging al tuo archivio immagini.



Funzioni principali

- Schermo touch con frontale in vetro
- Controllo remoto via endoscopio o pedale
- Connessione LAN o Wi-Fi 6E, 802.11X
- Memoria temporanea in caso di interruzione di rete
- Registrazione continua di video di qualsiasi durata
- Montaggio VESA
- Trasmissione in diretta

Configurazioni opzionali

- Galleria per selezione immagini e video
- Dashboard per la gestione centralizzata delle IBox Touch in rete
- Passaggio rapido tra diverse configurazioni
- Salvataggio su USB o rete
- Selezione tra due ingressi video
- Interfaccia per lettore barcode
- Interfaccia HL7-ADT



Sicurezza

- Blocco schermo con 1-click per massima protezione dati
- Sistema operativo sicuro (IT Security)
- Superficie in vetro antimicrobica
- Resistente agli urti, senza parti mobili
- Classe di protezione IP65
- Dispositivo medico conforme MDR (UE) 2017/745
- Testato secondo EN 60601-1-2
- Messa a terra secondo DIN 42801


Modelli

COMPACT 10"



192 mm x 276 mm x 54 mm
ca. 2,0 Kg

PRO 15"

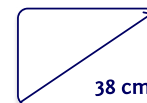

247 mm x 389 mm x 54 mm
ca. 2,7 Kg

HD

HD-SDI, HDMI, DVI, Composite

4K

4K HDMI, DVI

12G SDI



Il tuo specialista per la documentazione medica

Dal 1993 MESO stabilisce gli standard per l'archiviazione e la refertazione di immagini e video medici. Medici, tecnici e IT apprezzano i nostri prodotti per efficienza, affidabilità e uso intuitivo.

Scopri il nostro innovativo portfolio prodotti:



SonoWin® Soluzione completa per archiviazione e refertazione

Ottimizzato con i medici dal 1993: veloce, efficiente e affidabile. Adatto a tutte le specialità. Integra HL7, DICOM, GDT e altro.



DICOM Camera

Come telecamera di sistema o sempre a portata di mano. Un grande sollievo per infermieri, dermatologi e altri: riduce oltre l'80% del tempo per la documentazione di pelle e ferite.



Fissa un appuntamento.
Siamo lieti di consigliarti.



Persona di riferimento
Corinna Schwerin
corinna.schwerin@meso.biz

meso international GmbH
Markt 21-23, 09648 Mittweida
Germania

Telefono: +49 3727 9697 - 0
E-mail: info@meso.biz
www.IBoxTouch.com